

# STABILOK DENTINE PINS

## Käyttöohjeet

---

### Sisällys

Käyttötarkoitus

Symbolit

Varoitukset ja huomautukset

Hampaan valmistelu

Stabilok Pin -nastan asettaminen

Nastan muokkaaminen

Lyhentäminen


Taivuttaminen

Desinfiointi, sterilointi ja säilytys

Dentine Pins -nastat

Poranterät

Hävittäminen

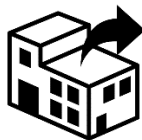

Fairfax Dental  
40 St. George's Road  
London  
SW19 4ED  
Iso-Britannia

Puh: 020-897-6464  
Faksi: 020-897-2727  
S-posti: admin@stabident.com

#### Yhdysvallat

Fairfax Dental Inc.  
2937 SW 27 Ave  
Suite #200B  
Miami, FL 33133  
USA

Puh: 1-800-233-2305  
Faksi: 305-476-7183  
S-posti: fairfax@stabident.com



**Fairfax Dental Ireland Ltd**  
Beechwood Close, Co Wicklow, Irlanti

Käyttötarkoitus

Stabilok Dentine Pins -nastat ovat tehokas ja edullinen tapa saada mekaanista lisäpitoa etu- ja takahampaiden korjauksiin. Kun nasta on kiinni hampaassa, sitä voi lyhentää ja/tai taivuttaa haluttuun asentoon.

Stabilok Dentine Pins -nastojen suurin etu on siinä, että ne pysyvät vastakulmaisessa istukassa, kunnes ne katkeavat automaattisesti oikean pituiseksi.

Symbolit

Seuraavia symboleja käytetään:



Valmistaja



Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa



Kertakäyttöinen (Dentine Pin -nasta)



Eränumero



Varoitukset ja huomautukset



Huomautus: USA:n liittovaltion laki rajoittaa tämän välineen myynnin vain laillistetuille terveydenhuollon ammattilaisille tai heidän määräyksestään.



Jakelija



Varoitukset ja huomautukset

- Poranterää ja nastoja tulee käyttää vain 2 000–5 000 kierr./min nopeudella.
- Dentine Pins -nastat ovat kertakäyttöisiä.
- Varmista, että nastat on desinfioitu ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että poranterät puhdistetaan ja steriloidaan ennen käyttöä ja käyttökertojen välissä ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että nastojen kanssa käytetään oikean kokoista poranterää.
- Käytä mahdollisimman pienikokoista nastaa säröytymisen välttämiseksi.

- Poranteriä voi käyttää uudelleen enintään 20 kertaa. Jos terää käytetään tätä enemmän, se saattaa tylsyä ja sen teho heikentyä.
- Älä yritä lyhentää nastaa ennen kuin se on asetettu hampaaseen, koska muutoin itsekiertyvä suippo kärki vahingoittuu tai irtoa.

Hampaan valmistelu

Hammas, johon Stabilok Dentine Pin -nastat aiotaan asentaa, täytyy puhdistaa kaikesta karieksesta ja kuivata ilmaruiskulla. Yleisesti ottaen, jokaiseen puuttuvaan nystermään tarvitaan erillinen Stabilok Pin -nasta. Ennen toimenpidettä otettava röntgenkuva voi auttaa tunnistamaan hammasytimen sijainnin ja koon.

Stabilok Pin -nastan asettaminen

Aseta Stabilok-poranterä vastakulmaiseen käsikappaleeseen ja lukitse se paikalleen. Kun moottori käy noin 2 000 kierr./min nopeudella, poraa reikä hammasluuhun yhdellä nopealla sisään–ulos-liikkeellä varoen samalla poraamasta vahingossa kiilteeseen tai hammasytimeen. Stabilok-poranterässä on syvyysrajoitin, joka estää poraamasta liian syvälle.

Kun nastan reikä on porattu, irrota poranterä käsikappaleesta (poranterä tulee steriloida ennen kuin sitä käytetään uudelleen).

Aseta Stabilok Dentine Pin -nasta käsikappaleeseen ja lukitse se paikalleen. Kun nasta pyörii noin 2 000 kierr./min nopeudella, vie nastan kärki poratun reiän suuaukolle. Nasta kiertyy itsestään poratun reiän pohjalle ja katkeaa kierteiseen osaan muodostuneen kaulan kohdalta.

Nastan muokkaaminen

Stabilok Dentine Pins -nastoja voi muokata joko lyhentämällä tai taivuttamalla niitä.

Lyhentäminen

Nasta lyhennetään seuraavasti: Aseta suurnopeuksinen timantti- tai karbidifissuura turbiinimoottorilla varustettuun käsikappaleeseen. Aseta käsikappale niin, että hammaspora on kohtisuorassa Stabilok Dentine Pin -nastaan nähden ja kohdassa, josta nasta aiotaan katkaista. Kun pora pyörii, vie se varovasti kiinni nastaan ja anna sen katkaista nasta kokonaan. Toimenpidettä voidaan helpottaa liikuttamalla poraa varovasti edestakaisin sen akselin suuntaisesti.

Taivuttaminen

Stabilok Pins -nastoja voi taivuttaa yhden kerran, kun ne on asetettu hampaaseen. Amalgaamitäppäintä voidaan käyttää asettamalla se nastan kärkeen ja taivuttamalla nastaa varovasti haluttuun asentoon.

Nastaa tulee taivuttaa vain yhden kerran, koska toistuva taivuttaminen heikentää itse nastaa ja myös poratun reiän pitokykyä.

Desinfiointi, sterilointi ja säilytys

Dentine Pins -nastat

Stabilok-nastat voidaan desinfoida ennen käyttöä laittamalla ne kylmään sterilointiliuokseen (ts. 2 % w/w Milton-sterilointineste) 10 minuutiksi ja huuhtomalla ne steriilillä vedellä ennen käyttöä.

Poranterät

Ennen ensimmäistä käyttökertaa:

Stabilok-poranterät tulee steriloida autoklaavissa 134 °C:ssa kolme minuuttia.

Käytön jälkeen:

Kaikki roskat, hammasluu jne. tulee poistaa Stabilok-porista manuaalisesti ja sen jälkeen huuhdella ja steriloida autoklaavissa 134 °C:ssa kolme minuuttia.

Huomautus: Poranterät tulee puhdistaa ja steriloida heti käytön jälkeen niin pian kuin mahdollista. Puhdistus ja sterilointi täytyy tehdä 24 tunnin sisällä käytöstä.

Katso paikallisia sterilointiohjeita.

Tarkempia ohjeita uudelleenkäsittelystä on saatavana pyynnöstä.

Korroosion välttämiseksi poranterät tulee kuivata ilmapuhaltimella ennen varastointia, ja niitä tulee säilyttää alkuperäisessä Stabilok-säiliössä kuivassa ja puhtaassa paikassa. Poranterät voidaan tarvittaessa steriloida ennen käyttöä.

Hävittäminen

Varsi, josta Stabilok-nasta on katkennut, tulee hävittää käytön jälkeen laittamalla se varovasti neulankeräysastiaan.

Poranterät tulee hävittää 20 käyttökerran jälkeen laittamalla ne varovasti neulankeräysastiaan.