

TENONS DENTINAIRES STABILOK

Mode d'emploi

Sommaire

Utilisation

Symboles

Avertissement

Préparation de la dent:

Procédure d'insertion du Tenon dentinaire Stabiloc:

Modifier le tenon dentinaire:

Raccourcir


Courber

Désinfection, stérilisation et stockage

Tenons dentinaires

Forets

Élimination des déchets

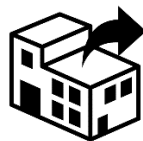

Fairfax Dental
40 St. George's Road
Londres
SW19 4ED
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 20 8947 6464
Fax: +44 (0) 20 8947 2727
Email: admin@stabident.com
www.fairfaxdentalproducts.com

États-Unis d'Amérique

Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Ave
Suite #200B
Miami, FL 33133
États-Unis d'Amérique
Tél: 1-800-233-2305
Fax: 305-476-7183
Email: fairfax@stabident.com



MD Reps Ltd
12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU
Irlande du Nord

Utilisation

Les Tenons dentinaires Stabilok sont une manière efficace et économique d’obtenir une rétention mécanique supplémentaire pour la restauration des dents antérieures et postérieures.

Une fois insérés dans la dent, ils peuvent être raccourcis et / ou courbés dans la position désirée.

Un grand avantage des Tenons dentinaires Stabilok est que le tenon dentinaire est maintenu en toute sécurité sur un manche pour contre-angle, jusqu’à ce qu’il soit prêt à se détacher automatiquement dans la dent à la profondeur adéquate.

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés :

 Fabricant

 Représentant autorisé de l'UE

 Usage unique (tenon dentinaire)

 Numéro de LOT

 Avertissement

 Attention : la loi fédérale des Etats-Unis d’Amérique n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par tout autre professionnel de santé.

 Distributeur

 **Avertissement**

- Le foret et les tenons dentinaires doivent seulement être utilisés à une vitesse de rotation de 2000-5000 tours/mn.
- Les tenons dentinaires sont à usage unique
- Assurez-vous que les tenons dentinaires sont désinfectés conformément aux instructions.
- Veillez à ce que les forets soient nettoyés et stérilisés avant l'utilisation et entre les utilisations, conformément aux instructions.
- Veillez à utiliser la bonne taille de forets pour les tenons dentinaires.

- Veuillez utiliser la plus petite taille de tenon dentinaire possible pour réduire le risque de fissuration.
- Les forets peuvent être réutilisés 20 fois maximum. Au-delà de ce nombre, le foret risque de s’émousser et de perdre de son efficacité.
- Ne pas essayer de raccourcir le tenon dentinaire avant qu’il ne soit inséré dans la dent, car cela endommagerait ou enlèverait l’extrémité conique qui permet l’auto-taraudage.

Préparation de la dent

La dent qui nécessite l’insertion du Tenon dentinaire Stabilok doit être indemne de toute carie et séchée avec une seringue à air. En général, un Tenon dentinaire Stabilok est nécessaire pour chaque cuspidé manquante. Une radiographie pré-opératoire peut être utile pour visualiser la position et la taille de la pulpe dentaire.

Procédure d’insertion du tenon dentinaire Stabilok

Insérez le Foret Stabilok sur un contre-angle et le bloquer. Avec une vitesse de rotation d’environ 2 000 tours/mn, faire un puits d’insertion dans la dentine, en prenant soin de ne pas forer accidentellement dans l’émail ou la pulpe dentaire. Le Foret Stabilok a un épaulement qui évite un forage trop profond.

Une fois que le puits d’insertion du tenon dentinaire a été réalisé, retirer le foret du contre-angle (le foret doit être stérilisé avant une prochaine utilisation).

Insérez le Tenon dentinaire Stabilok dans le contre-angle et le bloquer. Avec une vitesse de rotation du tenon dentinaire d’environ 2 000 tours/mn, présenter l’extrémité du Tenon dentinaire dans le puits d’insertion préalablement foré. Le Tenon dentinaire sera alors auto-taraudé jusqu’au fond du puits d’insertion préalablement foré et se détachera au niveau du col formé dans la portion taraudée.

Modifier le tenon dentinaire

Les tenons dentinaires peuvent être modifiés soit en les raccourcissant, soit en les courbant.

Raccourcir

Afin de raccourcir le tenon dentinaire, procéder ainsi : insérer sur la turbine une fraise diamantée ou une fraise en carbure de tungstène travaillant à grande vitesse. Positionner la turbine de telle sorte que la fraise soit perpendiculaire au tenon dentinaire Stabilok et à un point correspondant au niveau duquel le tenon dentinaire doit être sectionné. Avec la fraise en rotation, mettre doucement la fraise en contact avec le tenon dentinaire pour le sectionner de part et d’autre. Un mouvement axial en douceur de la fraise d’avant en arrière facilitera l’opération.

Courber

Les tenons dentinaires peuvent être courbés une seule fois après avoir été insérés dans la dent. Un fouloir à amalgame peut être utilisé, en l’appliquant sur l’extrémité du tenon dentinaire et en courbant doucement le tenon dentinaire dans la position requise.

Le tenon dentinaire ne doit pas être courbé plus d’une fois car des courbures répétées vont l’affaiblir et peuvent donc affaiblir sa rétention dans le puits d’insertion préalablement foré.

Désinfection, stérilisation et stockage

Tenons dentinaires

Les Tenons dentinaires Stabilok peuvent être désinfectés avant utilisation en les plaçant dans une solution de désinfection à froid comme le Liquide de Stérilisation Milton (2% w/w) pendant 10 minutes, puis en les rinçant dans de l’eau stérile avant utilisation.

Forets

Avant première utilisation :

Les Forets Stabilok doivent être stérilisés en autoclave à 134°C pendant 3 minutes.

Après utilisation :

Les Forets Stabilok ne doivent présenter aucun débris, dentine, etc. Si des débris sont présents, ceux-ci doivent être retirés manuellement, et les Forets doivent être rincés et stérilisés dans un autoclave à 134° C pendant 3 minutes.

Veillez noter : le nettoyage et la stérilisation des forets doivent être effectués immédiatement après utilisation si possible. Le nettoyage et la stérilisation doivent être effectués dans les 24 heures suivant l’utilisation.

Se référer aux instructions de stérilisation.

Des instructions de réutilisation plus détaillées sont disponibles sur demande.

Pour minimiser le risque de corrosion, assurez-vous que les forets soient séchés avant le stockage à l'aide d'un séchoir à air et stockés dans le conteneur d'origine Stabilok dans un environnement sec et propre. Les forets peuvent être stérilisés avant utilisation si nécessaire.

Élimination des déchets

Après l’utilisation, la tige de laquelle le Tenon dentinaire Stabilok s'est détachée doit être jetée avec précaution dans un récipient pour objets tranchants.

Après 20 utilisations, le foret dentaire doit être jeté avec précaution dans un récipient pour objets tranchants.