

PINOS PARA DENTINA STABILOK

Instruções de utilização

Conteúdos

Utilização pretendida

Símbolos

Avisos e Cuidados

Preparação do dente:

Procedimento para a colocação do Pino Stabilok

Modificar o Pino:

Encurtamento

Flexão

Desinfecção, Esterilização e Armazenamento


Pinos para dentina

Brocas dentárias

Eliminação



1639

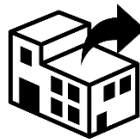

Fairfax Dental
40 St. George's Road
Londres
SW19 4ED
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 20 8947 6464
Fax: +44 (0) 20 8947 2727
Email: admin@stabident.com
www.fairfaxdentalproducts.com

Estados Unidos

Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Ave
Suite #200B
Miami, FL 33133
EUA
Tel: 1-800-233-2305
Fax: 305-476-7183
Email: fairfax@stabident.com



MD Reps Ltd

12-16 Bridge Street, Belfast,
BT1 1LU
Irlanda do Norte

Utilização pretendida

Os Pinos para Dentina Stabilok são uma forma eficaz e económica de proporcionar uma retenção mecânica extra para restaurações tanto nos dentes anteriores como posteriores.

Uma vez no lugar no dente, podem ser reduzidos em comprimento e/ou dobrados para a posição desejada.

Uma enorme vantagem dos Pinos para Dentina Stabilok é que o pino é segurado firmemente numa haste contra-ângulo até estar pronto a seccionar automaticamente no dente na profundidade correta.

Símbolos

São utilizados os seguintes símbolos:

-  Fabricante
-  Representante Autorizado na UE
-  Apenas de uso único (Pino para Dentina)
-  Número de LOTE
-  Avisos e Cuidados
-  Cuidado: A lei federal (EUA) restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado
-  Distribuidor

Avisos e Cuidados

- A broca e os pinos só devem ser utilizados a 2000-5000 rpm
- Os pinos para dentina são de utilização única
- Garantir que os pinos são desinfetados de acordo com as instruções
- Garantir que as brocas são limpas e esterilizadas antes da utilização e entre utilizações de acordo com as instruções
- Garantir que é utilizado o tamanho correto de broca para os pinos
- Utilizar o pino de menor tamanho possível para reduzir o risco de fissuramento
- As brocas podem ser reutilizadas um máximo de 20 vezes. Uma reutilização superior a esta pode fazer com que a broca se torne romba e menos eficaz.

- Não tente encurtar o pino antes de o colocar no dente, pois isso iria danificar ou remover a ponta cônica que permite a autofixação

Preparação do dente:

O dente que requer a colocação de um Pino para dentina Stabilok deve ser limpo de todas as cáries e seco com uma seringa de ar. Em geral, será necessário um Pino Stabilok individual para cada cúspide em falta. Uma radiografia pré-operatória pode ser útil para identificar a posição e o tamanho da polpa.

Procedimento para a colocação do Pino Stabilok:

Colocar uma Broca Stabilok numa peça de mão contra-ângulo e fixar na posição. Com o motor a funcionar a uma velocidade de cerca de 2000 rpm realizar um orifício na dentina usando um único movimento rápido de entrada e saída, tendo o cuidado de não perfurar acidentalmente o esmalte ou a polpa. A Broca Stabilok tem um rebordo autolimitador que impede a perfuração demasiado profunda.

Uma vez realizado o orifício do pino, remover a broca da peça de mão (a broca deve ser esterilizada antes de ser novamente utilizada).

Colocar um Pino para Dentina Stabilok na peça de mão e trancar na posição. Com o Pino a rodar a cerca de 2000 rpm, colocar a ponta do pino na abertura do orifício pré-perfurado do pino. O pino será então automaticamente enroscado até ao fundo do orifício pré-perfurado e irá seccionar no pescoço da porção roscada.

Modificar o Pino:

Os Pinos para Dentina Stabilok podem ser modificados por encurtamento ou flexão.

Encurtamento

Para encurtar um pino, proceder da seguinte forma: Colocar uma broca de diamante ou carboneto de alta velocidade numa peça de mão de turbina. Posicionar a peça de mão de modo a que a broca esteja perpendicular ao Pino para Dentina Stabilok e num ponto correspondente ao local onde o pino deve ser cortado. Com a broca a funcionar, colocar suavemente a broca em contacto com o pino e permitir que esta corte através do pino de um lado para o outro. Um movimento axial suave da broca para a frente e para trás facilitará a operação.

Flexão

Os Pinos Stabilok podem ser dobrados uma vez, após terem sido colocados no dente. Pode ser utilizado um obturador de amálgama, aplicando-o na ponta do pino e dobrando suavemente o pino para a posição requerida.

O pino não deve ser dobrado mais de uma vez porque a dobra repetida enfraquecerá o pino e pode também enfraquecer a sua retenção no orifício pré-perfurado.

Desinfecção, Esterilização e Armazenamento

Pinos para Dentina

Os pinos Stabilok podem ser desinfetados antes de serem utilizados, colocando-os numa solução de esterilização a frio, ou seja, Milton Sterilising Fluid (2% p/p) durante 10 minutos e depois enxaguando-os com água esterilizada antes de serem utilizados.

Brocas dentárias

Antes da primeira utilização:

As brocas Stabilok devem ser esterilizadas em autoclave a 134 °C durante 3 min.

Após a utilização:



Deve remover manualmente quaisquer detritos, dentina, etc., das brocas Stabilok e depois lavar e esterilizar em autoclave a 134 °C durante 3 min.

Nota: A limpeza e esterilização das brocas deve ser efetuada imediatamente após a utilização, sempre que possível. A limpeza e a esterilização devem ser realizadas no prazo de 24 horas após a utilização.

Consultar as diretrizes locais de esterilização.

Estão disponíveis, mediante pedido, instruções de reprocessamento mais detalhadas.

Para minimizar o potencial de corrosão, garantir que as brocas são secas antes de serem armazenadas utilizando um secador de ar e armazenadas no recipiente original Stabilok num ambiente seco e limpo. As brocas podem ser esterilizadas antes de serem utilizadas, se necessário.

Eliminação

Após a utilização, a haste de onde o pino Stabilok foi seccionado deve ser eliminada cuidadosamente num contentor para material cortante.

Após 20 utilizações, a broca dentária deve ser eliminada cuidadosamente num contentor para material cortante.