

PERNI PER DENTINA STABILOK

Istruzioni per l'uso

Contenuto

Uso previsto

Simboli

Avvertenze e precauzioni

Preparazione del dente:

Procedura per posizionare il perno Stabilok

Modifica del perno:

Accorciamento

Piegatura

Disinfezione, sterilizzazione e conservazione


Perni per dentina

Punte dentali

Smaltimento



CE
1639

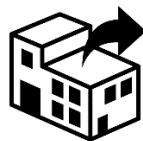

Fairfax Dental
40 St. George's Road
Londra
SW19 4ED
Regno Unito
Tel: +44 (0) 20 8947 6464
Fax: +44 (0) 20 8947 2727
Email: admin@stabident.com
www.fairfaxdentalproducts.com

Stati Uniti

Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Ave
Suite #200B
Miami, FL 33133
Stati Uniti
Tel: 1 -800-233-2305
Fax: 305-476-7183
Email: fairfax@stabident.com



MD Reps Ltd
12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU
Irlanda del Nord

Uso previsto

I perni per dentina Stabilok sono un modo efficace ed economico per fornire una ritenzione meccanica supplementare per le ricostruzioni dei denti anteriori e posteriori.

Una volta posizionati nel dente, possono essere ridotti in lunghezza e/o piegati nella posizione desiderata.

Uno dei principali vantaggi dei perni per dentina Stabilok è che il perno è saldamente trattenuto in un gambo contrangolo fino a quando non è pronto a sfilarsi automaticamente nel dente alla profondità corretta

Simboli

Vengono utilizzati i seguenti simboli:



Produttore



Rappresentante autorizzato dall'UE



Esclusivamente monouso (perno dentale)



Numero di LOTTO



Avvertenze e precauzioni



Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a o su ordine di un professionista sanitario autorizzato.



Distributore



Avvertenze e precauzioni

- La punta e i perni devono essere usati solamente a 2'000-5'000 giri/min
- I perni dentali sono solo monouso
- Assicurarsi che i perni siano disinfettati secondo le istruzioni.
- Assicurarsi che le punte siano pulite e sterilizzate prima dell'uso e tra un uso e l'altro, secondo le istruzioni.
- Assicurarsi di utilizzare la dimensione corretta della punta per i perni.
- Utilizzare il perno più piccolo possibile per ridurre il rischio di formazione di crepe.



- Le punte possono essere riutilizzate per un massimo di 20 volte. Un riutilizzo superiore a questo limite può causare la perdita di efficacia della punta.
- Non tentare di accorciare il perno prima di inserirlo nel dente, perché ciò danneggerebbe o rimuoverebbe la punta rastremata che consente l'autofilettatura.

Preparazione del dente:

Il dente che richiede il posizionamento di un perno per dentina Stabilok deve essere ripulito da tutte le carie e asciugato con una siringa ad aria. In generale, sarà necessario un perno Stabilok distinto per ogni cuspidè mancante. Una radiografia preoperatoria può essere utile per identificare la posizione e le dimensioni della polpa.

Procedura per posizionare il perno Stabilok

Collocare una punta a spirale Stabilok in un manipolo contrangolo e fissarla in posizione. Con il motore in funzione a una velocità di circa 2'000 giri/minuto, praticare un foro nella dentina con un unico rapido movimento dentro-fuori, facendo attenzione a non forare accidentalmente lo smalto o la polpa. La punta a spirale Stabilok è dotata di una spalla autolimitante che impedisce di forare troppo in profondità.

Una volta praticato il foro per il perno, rimuovere la punta a spirale dal manipolo (la punta a spirale deve essere sterilizzata prima di essere riutilizzata).

Inserire un perno per dentina Stabilok nel manipolo e bloccarlo in posizione. Con il perno in rotazione a circa 2'000 giri al minuto, presentare la punta del perno all'apertura del foro preforato. Il perno si autofiletterà fino al fondo del foro preforato e si staccherà dal collo formato nella parte filettata.

Modifica del perno:

I perni per dentina Stabilok possono essere modificati accorciandoli o piegandoli.

Accorciamento

Per accorciare un perno, procedere come segue: posizionare uno strumento per fessure in diamante o in carburo ad alta velocità in un manipolo a turbina. Posizionare il manipolo in modo che lo strumento sia perpendicolare al perno per dentina Stabilok e in un punto corrispondente al punto in cui il perno deve essere tagliato. Con lo strumento in funzione, portare delicatamente lo strumento a contatto con il perno e lasciare che tagli il perno da un lato all'altro. Un leggero movimento assiale dello strumento avanti e indietro faciliterà l'operazione.

Piegatura

I perni Stabilok possono essere piegati una volta, dopo essere stati inseriti nel dente. È possibile utilizzare una sonda per amalgama applicandola alla punta del perno e piegandolo delicatamente nella posizione desiderata.

Il perno non deve essere piegato più di una volta perché una piegatura ripetuta indebolisce il perno e può anche indebolire la sua ritenzione nel foro preforato.

Disinfezione, sterilizzazione e conservazione

Perni per dentina

I perni Stabilok possono essere disinfettati prima dell'uso immergendoli per 10 minuti in una soluzione sterilizzante fredda, ad esempio Milton Sterilising Fluid (2% p/p), e poi risciacquandoli con acqua sterile prima dell'uso.

Punte dentali

Prima del primo utilizzo:

Le punte Stabilok devono essere sterilizzate in autoclave a 134°C per 3 minuti.

Dopo l'utilizzo:



Bisogna rimuovere manualmente eventuali detriti, dentina ecc. dalle punte Stabilok che devono poi essere risciacquate e sterilizzate in autoclave a 134°C per 3 minuti.

Nota: la pulizia e la sterilizzazione delle punte devono essere eseguite immediatamente dopo l'uso, se possibile. La pulizia e la sterilizzazione devono essere eseguite entro 24 ore dall'uso.

Consultare le linee guida locali per la sterilizzazione.

Istruzioni più dettagliate per il ricondizionamento sono disponibili su richiesta.

Per ridurre al minimo la possibilità di corrosione, assicurarsi che le punte siano asciugate prima di essere conservate utilizzando un getto d'aria a secco e che siano conservate nel contenitore originale Stabilok in un ambiente asciutto e pulito. Se necessario, le punte possono essere sterilizzate prima dell'uso.

Smaltimento

Dopo l'uso, il gambo da cui si è staccato il perno Stabilok deve essere smaltito con cura in un contenitore per oggetti taglienti.

Dopo 20 utilizzi, la punta dentale deve essere smaltita con cura in un contenitore per oggetti taglienti.