

STABILOK PARAPULPÁLIS CSAPOK Használati útmutató

Tartalom

Rendeltetés

Szimbólumok

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A fog előkészítése:

A Stabilok csap behelyezésének menete:

A csap alakítása:

Rövidítés

Meghajlítás

Fertőtlenítés, sterilizálás és tárolás


Parapulpális csapok

Fogászati fúrók

Ártalmatlanítás



1639

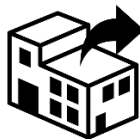

Fairfax Dental
40 St. George's Road
London
SW19 4ED
Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 20 8947 6464
Fax: +44 (0) 20 8947 2727
Email: admin@stabident.com
www.fairfaxdentalproducts.com

Egyesült Államok

Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Íve
Suite #200B
Miami, FL 33133
U.S.A
Tel: 1-800-233-2305
Fax: 305-476-7183
Email: fairfax@stabident.com



MD Reps Ltd

12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU
Észak-Írország

Rendeltetés

A Stabilok parapulpális csapok hatékony és gazdaságos módon extra mechanikai retenciót biztosítanak az elülső és a hátsó fogpótlásokhoz.

Miután a helyükre kerültek a fogban, hosszuk csökkenthető és/vagy a kívánt pozícióba hajlítható.

A Stabilok parapulpális csapok nagy előnye, hogy a csapot biztonságosan tartja a könyökdarab, amíg készen nem áll arra, hogy a megfelelő mélységben automatikusan leválasztódjon a fogban.

Szimbólumok

Az alábbi szimbólumokat használjuk:



Gyártó



Hivatalos EU-képviselőt



Egyszeri alkalmazásra (parapulpális csap)



Tételszám



Figyelmeztetések és óvintézkedések



Vigyázat! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező egészségügyi szakember által, vagy az általuk kiadott rendelvénnyre értékesíthető



Forgalmazó



Figyelmeztetések és óvintézkedések

- A fúró és a csapokat csak 2000–5000 fordulat/perc fordulatszámra szabad használni
- A parapulpális csapok kizárólag egyszer használatosak 
- Gondoskodjon a csapok fertőtlenítéséről az utasításoknak megfelelően
- Gondoskodjon a fúrók használat előtti és használat közbeni utasításoknak megfelelő tisztításáról és sterilizálásáról
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő fúróméretet használja a csapokhoz
- A lehető legkisebb méretű csapot használja a mikrorepedések kockázatának csökkentése érdekében.

- A fúrók legfeljebb 20 alkalommal használhatók fel újra. Ennél többszöri újrafelhasználás esetén a fúró tompává és kevésbé hatékonná válhat.
- Ne próbálja meg lerövidíteni a csapot a fogba helyezés előtt, mert ezzel károsíthatja vagy eltávolíthatja a kúpos hegyet, amely lehetővé teszi a menetvágást.

A fog előkészítése:

A Stabilok parapulpális csap behelyezését igénylő fogat meg kell tisztítani minden szuvas résztől, és levegő puszterrel meg kell szárítani. Általában minden hiányzó fogcsücsökhöz külön Stabilok csapra van szükség. A műtét előtti röntgenfelvétel hasznos lehet a pulpa helyzetének és méretének megállapításához.

A Stabilok csap behelyezésének menete:

Helyezze a Stabilok Twist Drill csigafúrót egy könyökdarabba, és rögzítse a helyére. A motort kb. 2000 fordulat/perces sebességgel járattva egyetlen gyors be-ki mozdulattal fúrjon lyukat a dentinbe, ügyelve arra, hogy véletlenül se fúrjon a zománcba vagy a pulpába. A Stabilok csigafúró önkorlátozó vállrésszel rendelkezik, amely megakadályozza a túl mélyre történő fúrást.

Miután kifúrta a csapfuratot, vegye ki a csigafúrót a kézidarabból (a csigafúrót sterilizálni kell, mielőtt újra használná).

Helyezzen egy Stabilok parapulpális csapot a kézidarabba, és rögzítse a helyére. A csapot kb. 2000 fordulat/perc fordulatszámra forgatva, helyezze a csap hegyét az előfúrt csapfurat nyílásához. A csap ezután az előfúrt lyuk aljáig menetet vág, és a menetes részen kialakult nyaknál leválasztódik.

A csap alakítása:

A Stabilok parapulpális csapok rövidítéssel vagy hajlítással alakíthatók.

Rövidítés

Csap rövidítéséhez a következőképpen járjon el: Helyezzen egy nagysebességű gyémánt vagy karbid fissura fúrót egy turbinás kézidarabba. Helyezze el a kézidarabot úgy, hogy a fúró merőlegesen álljon a Stabilok parapulpális csapra, azon a ponton, ahol el kell vágni a csapot. A fúró működtetése közben érintse a fúrót óvatosan a csaphoz, és hagyja, hogy teljesen átvágja a csapot. A műveletet megkönnyíti, ha a fúrógépet óvatosan ide-oda mozgatja axiális irányban.

Meghajlítás

A Stabilok csapok a fogba helyezés után egy alkalommal hajlíthatók. Amalgámtömőt is használhat ehhez: helyezze azt a csap hegyére és hajlítsa a csapot óvatosan a kívánt pozícióba.

A csapot tilos egynél többször meghajlítani, mert az ismételt hajlítás meggyengíti a csapot, és csökkentheti a retencióját is az előfúrt lyukban.

Fertőtlenítés, sterilizálás és tárolás

Parapulpális csapok

A használat előtti fertőtlenítéshez helyezze a Stabilok csapokat 10 percre hideg sterilizáló oldatba, pl. Milton sterilizáló folyadékba (2% m/m), majd használat előtt öblítse le steril vízzel.

Fogászati fúrók

Első használat előtt:

A Stabilok fúrókat autoklávban kell sterilizálni 134 °C-on 3 perc 

Használat után:

A Stabilok fúrókról kézzel el kell távolítani a törmeléket, dentint stb., majd le kell öblíteni, és ezt követően 3 percig 134 °C-on autoklávban kell sterilizálni.

Megjegyzés: A fúrók tisztítását és sterilizálását, amennyiben lehetséges, közvetlenül a használat után kell elvégezni. A tisztítást és sterilizálást a használatot követő 24 órán belül el kell végezni.

Lásd a helyi sterilizálási irányelveket.

Részletesebb regenerálási utasítások kérésre rendelkezésre állnak.

A korrózió minimalizálása érdekében tárolás előtt szárítsa meg a fúrókat nagy nyomású levegővel, például légpisztoly segítségével, és tárolja azokat az eredeti Stabilok tartóban, száraz, tiszta környezetben. A fúrók szükség esetén használat előtt sterilizálhatók.

Ártalmatlanítás

Használat után a szárat, amelyről a Stabilok csap levált, éleshulladék-tárolóba kell óvatosan kidobni.

A fogászati fúrót 20 használat után éleshulladék-tárolóba kell óvatosan kidobni.