

STABILOK DENTINE PINS

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Beoogd Gebruik

Symbolen

Waarschuwingen

Vorbereiden van de tand:

Procedure voor het plaatsen van de Stabilok Pin:

De Pin aanpassen:

Inkorten

Buigen

Desinfectie, Sterilisatie & Opslag


Dentine Pins

Tandheekundige Boren

Weggoaien



CE
1639

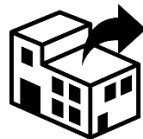

Fairfax Dental
40 St. George's Road
Londen
SW19 4ED
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 20 8947 6464
Fax: +44 (0) 20 8947 2727
E-mail: admin@stabident.com
www.fairfaxdentalproducts.com

Verenigde Staten

Fairfax Dental Inc.
2937 SW 27 Ave
Suite #200B
Miami, FL 33133
VS
Tel: 1-800-233-2305
Fax: 305-476-7183
E-mail: fairfax@stabident.com



MD Reps Ltd
12-16 Bridge Street, Belfast,
Northern Ireland, BT1 1LU

Beoogd gebruik

Stabilok Dentine Pins zijn een effectieve en economische manier om extra mechanische retentie te bieden voor restauraties in zowel voor- als achtertanden.

Eenmaal op hun plaats in de tand kunnen ze in lengte worden verkleind en/of in de gewenste positie worden gebogen.

Een groot voordeel van Stabilok Dentine Pins is dat de pin stevig in een hoekstuk wordt vastgehouden totdat hij klaar is om automatisch op de juiste diepte in de tand af te breken.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt:



Fabrikant



Gemachtigde vertegenwoordiger van de EU



Alleen voor eenmalig gebruik (Dentine Pin)



LOT nummer



Waarschuwingen



Let op: Volgens de federale wet (VS) mag dit apparaat alleen worden verkocht aan of in opdracht van een bevoegde zorgverlener



Distributeur



Waarschuwingen

- De boor en pins mogen alleen worden gebruikt bij 2.000-5.000 rpm
- De dentine pins zijn bedoeld voor eenmalig gebruik
- Zorg ervoor dat de pins worden gedesinfecteerd volgens de instructies
- Zorg ervoor dat de boren voor gebruik en tussen gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd in overeenstemming met de instructies
- Zorg ervoor dat de juiste boormaat wordt gebruikt voor de pins
- Gebruik de kleinst mogelijke pin om het risico op haarscheurtjes te verkleinen.



- De boren kunnen maximaal 20 keer hergebruikt worden. Hergebruik van meer dan dit aantal kan ervoor zorgen dat de boor bot en minder effectief wordt.
- Probeer de pin niet in te korten voordat deze in de tand is geplaatst, omdat dit de taps toelopende punt, die zelftappend is, kan beschadigen of verwijderen.

Vorbereiden van de tand:

De tand waarvoor een Stabilok Dentine Pin moet worden geplaatst, moet worden ontdaan van alle cariës en worden gedroogd met een luchtsput. Over het algemeen is voor elke ontbrekende knobbel een aparte Stabilok-pin nodig. Een preoperatieve röntgenfoto kan nuttig zijn om de positie en grootte van de pulpa te bepalen.

Procedure voor het plaatsen van de Stabilok Pin:

Plaats een Stabilok Spiraalboor in een hoekstuk en klik deze vast. Terwijl de motor draait met een toerental van ongeveer 2000 rpm, boort u een gat in de dentine met een enkele snelle in-uit beweging, waarbij u ervoor zorgt dat u niet per ongeluk in het glazuur of de pulpa boort. De Stabilok Spiraalboor heeft een zelf begrenzend schouder die te diep boren voorkomt.

Nadat het pingat is geboord, verwijdert u de spiraalboor uit het handstuk (de spiraalboor moet gesteriliseerd worden voordat deze opnieuw gebruikt wordt).

Plaats een Stabilok Dentine Pin in het handstuk en klik deze vast. Terwijl de pin ronddraait met ongeveer 2000 rpm, brengt u de punt van de pin naar de opening van het voorgeboorde pingat. De pin zal dan vanzelf in de bodem van het voorgeboorde gat worden geschroefd en afbreken bij de nek die is gevormd in het van schroefdraad voorziene gedeelte.

De Pin aanpassen:

Stabilok Dentine Pins kunnen worden aangepast door ze in te korten of te buigen.

Inkorten

Om een pin in te korten, gaat u als volgt te werk: plaats een snelle diamant- of hardmetalen spleetboor in een turbinehandstuk. Plaats het handstuk zodanig dat de boor loodrecht op de Stabilok Dentine Pin staat en op een punt dat overeenkomt met waar de pin moet worden doorgesneden. Terwijl de boor loopt, brengt u de boor voorzichtig in contact met de pin en laat u hem van de ene naar de andere kant door de pin snijden. Een zachte axiale beweging van de boor heen en weer zal deze procedure vergemakkelijken.

Buigen

Stabilok Pins kunnen eenmaal worden gebogen, nadat ze in de tand zijn geplaatst. Een amalgaamplugger kan worden gebruikt door deze

op de punt van de pin aan te brengen en de pin voorzichtig in de gewenste positie te buigen.

De pin mag niet meer dan één keer worden gebogen, omdat herhaaldelijk buigen de pin verzwakt en ook de bevestiging in het voorgeboorde gat kan verzwakken.

Desinfectie, Sterilisatie & Opslag

Dentine Pins

Stabilok Pins kunnen vóór gebruik worden gedesinfecteerd door ze gedurende 10 minuten in een koude sterilisatieoplossing, d.w.z. Milton-sterilisatievloeistof (2% w/w) te plaatsen en ze vervolgens voor gebruik met steriel water te spoelen.

Tandheelkundige boren

Voor het eerste gebruik:

Stabilok-boren moeten gedurende 3 minuten in een autoclaaf bij 134°C worden gesteriliseerd.

Na gebruik:



De Stabilok-boren moeten handmatig van elk vuil, dentine enz. worden ontdaan, vervolgens worden gespoeld en aansluitend gedurende 3 minuten in een autoclaaf op 134°C gesteriliseerd worden.

Opmerking: de reiniging en sterilisatie van de boren moet, indien praktisch mogelijk, onmiddellijk na gebruik worden uitgevoerd. Reiniging en sterilisatie moeten binnen 24 uur na gebruik worden uitgevoerd.

Raadpleeg de lokale richtlijnen voor sterilisatie.

Meer gedetailleerde instructies voor herverwerking zijn op aanvraag beschikbaar.

Om de kans op corrosie tot een minimum te beperken, dient u ervoor te zorgen dat de boren voorafgaand aan opslag worden gedroogd met behulp van een luchtföhn en worden bewaard in de originele Stabilok-container in een droge, schone omgeving. Indien nodig kunnen de boren voor gebruik worden gesteriliseerd.

Weggoeien

Na gebruik moet de schacht waarvan de Stabilok Pin is afgebroken, zorgvuldig worden weggegooid in een naaldencontainer.

Na 20 keer gebruik moet de tandheelkundige boor zorgvuldig worden weggegooid in een naaldencontainer.