

# ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ

## STABILOK

### Οδηγίες χρήσης

---

#### Περιεχόμενα

Προβλεπόμενη χρήση

Σύμβολα

Προειδοποιήσεις & Προφυλάξεις

Προετοιμασία του δοντιού:

Διαδικασία τοποθέτησης της καρφίδας Stabilok:

Τροποποιώντας την καρφίδα:

Κόντεμα


Κάμψη

Απολύμανση, αποστείρωση και αποθήκευση

Οδοντική καρφίδα

Οδοντιατρικά τρυπάνια

Απόρριψη

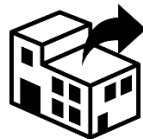

Fairfax Dental  
40 St. George's Road  
London  
SW19 4ED  
Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλ: +44 (0) 20 8947 6464  
Fax: +44 (0) 20 8947 2727  
Email: [admin@stabident.com](mailto:admin@stabident.com)  
[www.fairfaxdentalproducts.com](http://www.fairfaxdentalproducts.com)

**Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής**  
Fairfax Dental Inc.  
2937 SW 27 Ave  
Suite #200B  
Miami, FL 33133  
Η.Π.Α.  
Τηλ: 1-800-233-2305  
Fax: 305-476-7183  
Email: [fairfax@stabident.com](mailto:fairfax@stabident.com)



**MD Reps Ltd**  
12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU,  
Βόρεια Ιρλανδία

Προβλεπόμενη χρήση

Οι καρφίδες οδοντίνης Stabilok είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για την παροχή πρόσθετης μηχανικής συγκράτησης των αποκαταστάσεων τόσο στα πρόσθια όσο και στα οπίσθια δόντια.

Μόλις τοποθετηθούν στο δόντι, μπορούν να μειωθούν σε μήκος ή/και να καμφθούν στην επιθυμητή θέση.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των καρφίδων οδοντίνης Stabilok είναι ότι ο πείρος συγκρατείται με ασφάλεια σε ένα αντίθετης γωνίας στέλεχος έως ότου είναι έτοιμος να διατηρηθεί αυτόματα στο δόντι στο σωστό βάθος.

Σύμβολα

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Κατασκευαστής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την ΕΕ



Για μία μόνο χρήση (Καρφίδα οδοντίνης)



Αριθμός ΠΑΡΤΙΔΑΣ



Προειδοποιήσεις & Προφυλάξεις



Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ή κατόπιν εντολής αδειοδοτημένου επαγγελματία υγείας.



Διανομέας



Προειδοποιήσεις & Προφυλάξεις

- Το τρυπάνι και οι καρφίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις 2.000-5.000 στροφές ανά λεπτό
- Οι καρφίδες οδοντίνης είναι μόνο μιας χρήσης
- Βεβαιωθείτε ότι οι καρφίδες έχουν απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρυπάνια καθαρίζονται και αποστειρώνονται πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό μέγεθος τρυπανιού για τις καρφίδες



- Χρησιμοποιήστε το μικρότερο δυνατό μέγεθος καρφίδας για να περιορίσετε τον κίνδυνο σχηματισμού ρωγμών
- Τα τρυπάνια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν το πολύ 20 φορές. Η επαναχρησιμοποίηση πέραν αυτού του αριθμού ενδέχεται να προκαλέσει την αμβλύτητα του τρυπανιού και τη μείωση της αποτελεσματικότητάς του
- Μην επιχειρήσετε να κοντύνετε τον πείρο πριν τον τοποθετήσετε στο δόντι, διότι έτσι θα καταστραφεί ή θα αφαιρεθεί το κωνικό άκρο που επιτρέπει την αυτοδιάτρηση.

Προετοιμασία του δοντιού:

Το δόντι που απαιτεί την τοποθέτηση μιας οδοντικής καρφίδας Stabilok θα πρέπει να καθαριστεί από κάθε τερηδόνα και να στεγνώσει με σύριγγα αέρος. Γενικά, μια ξεχωριστή οδοντική καρφίδα Stabilok θα απαιτείται για κάθε γλωχίνα που λείπει. Μια προεγχειρητική ακτινογραφία ενδέχεται να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της θέσης και του μεγέθους του πολφού.

Διαδικασία τοποθέτησης της καρφίδας Stabilok:

Τοποθετήστε ένα ελικοειδές τρυπάνι Stabilok σε μία χειρολαβή γωνίας αντίθετης κατεύθυνσης και ασφαλίστε το στη θέση του. Με το μοτέρ να λειτουργεί με ταχύτητα περίπου 2000 στροφών ανά λεπτό, διανοίξετε μια οπή στην οδοντίνη με μία μόνο ταχεία κίνηση μέσα-έξω, προσέχοντας να μην τρυπήσετε κατά λάθος την αδαμαντίνη ή τον πολφό. Το ελικοειδές τρυπάνι Stabilok διαθέτει έναν αυτοπεριοριζόμενο ώμο που αποτρέπει τη διάτρηση σε μεγάλο βάθος.

Μετά τη διάτρηση της οπής του πείρου, αφαιρέστε το τρυπάνι από τη χειρολαβή (το τρυπάνι θα πρέπει να αποστειρωθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά).

Τοποθετήστε μια καρφίδα οδοντίνης στη χειρολαβή και ασφαλίστε τη στη θέση της. Με τον πείρο να περιστρέφεται με περίπου 2000 στροφές ανά λεπτό, τοποθετήστε την άκρη του πείρου στο άνοιγμα της προ-διατρημένης οπής του πείρου. Στη συνέχεια, ο πείρος θα βιδωθεί από μόνος του στον πυθμένα της προ-διάτρητης οπής και θα αποκοπεί στο λαϊμό που σχηματίζεται στο τμήμα με σπείρωμα.

Τροποποιώντας την καρφίδα:

Οι καρφίδες οδοντίνης Stabilok μπορούν να τροποποιηθούν είτε με σύντμηση είτε με κάμψη.

Κόντεμα

Για να κοντύνετε έναν πείρο, προχωρήστε ως εξής: Τοποθετήστε ένα υψηλής ταχύτητας αδαμάντινο ή καρβιδιοφόρο διατρητικό εργαλείο σε μια στροβιλοφόρο χειρολαβή. Τοποθετήστε τη χειρολαβή έτσι ώστε η φρέζα να είναι κάθετη στις καρφίδες οδοντίνης Stabilok και σε ένα σημείο που αντιστοιχεί στο σημείο που πρόκειται να κοπεί ο πείρος. Με τη φρέζα σε λειτουργία, φέρτε απαλά τη φρέζα σε επαφή με τον πείρο και αφήστε την να κόψει τον

πείρο από τη μία πλευρά στην άλλη. Μια ήπια αξονική κίνηση του κοπτικού από και προς θα διευκολύνει τη λειτουργία.

Κάμψη

Οι καρφίδες Stabilok μπορούν να καμφθούν μία φορά, αφού τοποθετηθούν στο δόντι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πώμα αμαλγάματος εφαρμόζοντάς το στην άκρη της καρφίδας και κάμπτοντας απαλά την ακίδα στην απαιτούμενη θέση.

Ο πείρος δεν πρέπει να κάμπτεται περισσότερο από μία φορά, διότι η επαναλαμβανόμενη κάμψη θα αποδυναμώσει τον πείρο και ενδέχεται επίσης να αποδυναμώσει τη συγκράτησή του στην προ-διάτρητη οπή.

Απολύμανση, αποστείρωση και αποθήκευση

Οδοντική καρφίδα

Οι καρφίδες Stabilok μπορούν να απολυμανθούν πριν από τη χρήση τοποθετώντας τες σε κρύο διάλυμα αποστείρωσης, π.χ. Milton Sterilising Fluid (2% w/w) για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένοντάς τες με αποστειρωμένο νερό πριν από τη χρήση.

Οδοντιατρικά τρυπάνια

Πριν από την πρώτη χρήση:

Τα τρυπάνια Stabilok πρέπει να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο στους 134°C για 3 λεπτά.

Μετά τη χρήση:



Στα τρυπάνια Stabilok θα πρέπει να αφαιρούνται με το χέρι τυχόν υπολείμματα, οδοντίνη κ.λπ., να ξεπλένονται και στη συνέχεια να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο στους 134°C για 3 λεπτά.

Σημείωση: Ο καθαρισμός και η αποστείρωση των τρυπάνων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο καθαρισμός και η αποστείρωση πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 24 ωρών από τη χρήση.

Ανατρέξτε στις τοπικές οδηγίες αποστείρωσης.

Λεπτομερέστερες οδηγίες επανεπεξεργασίας διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα διάβρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα τρυπάνια έχουν στεγνώσει πριν από την αποθήκευση με στεγνωτήρα αέρος και έχουν αποθηκευτεί στον αρχικό περιέκτη Stabilok σε ξηρό, καθαρό περιβάλλον. Τα τρυπάνια μπορούν να αποστειρωθούν πριν από τη χρήση, εάν απαιτείται.

Απόρριψη

Μετά τη χρήση, το στέλεχος από το οποίο έχει αποκοπεί ο πείρος Stabilok θα πρέπει να απορρίπτεται προσεκτικά σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.

Μετά από 20 χρήσεις, το οδοντιατρικό τρυπάνι πρέπει να απορρίπτεται προσεκτικά σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.